

機械器具(39) 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001


アトムリン式筋腫鉗子

【警告】

- 本品を改造しないこと。
[破損の原因になります。]

【形状・構造および原理等】

**●形状

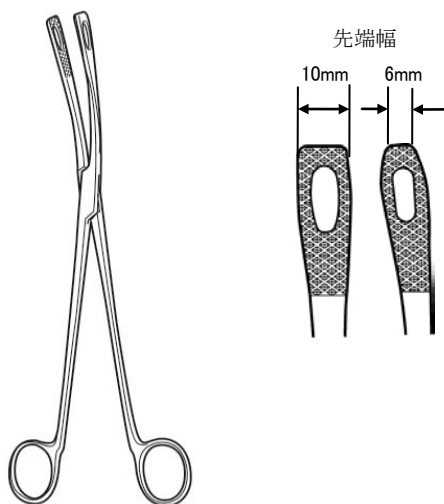

●材質 ステンレス製

*●寸法

先端幅	全長
10mm	27cm
6mm	

*●関節部 BOX-LOCK

●原理

本品のリング状の近位端を開閉することで、遠位端の把持部が開閉し、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持できる。

【使用目的、効能または効果】

本品は、臓器、組織又は血管を把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

外観：目視検査にて表面に機能を損なうような欠陥、または汚染物を認めない。

【操作方法または使用方法等】

1. 基本的な使用方法

- (1) 使用前に本品が洗浄・滅菌されていること、また傷や亀裂、曲がり、先端部の損傷、可動部の異常等がないことを確認してください。異常が発見された場合は使用を中止してください。
- (2) 使用后、本品に異常がないことを確認してください。本品に破損・欠損等がある場合は、患者の体内に遺残している恐れがあります。また、付着している血液、体液、組織および薬品等が乾燥・固化しないうちに、できるだけ早く洗浄してください。
- (3) 洗浄後は滅菌し、次の使用に備えて適切に保管してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) 患者、またはその疑いのある患者に使用した場合は、CJD に関する国内規制およびガイドライン等を遵守すること。
- ステンレス鋼は錆を生じにくい金属ですが、洗浄・保管等が不適切な場合は錆を生じます。
- 過剰な応力がかかるとう本品の折れの原因となります。また、錆が生じていた場合、その部分から折れやすくなります。

2. 使用に関する注意

- 本品で筋腫体部を掴んだときは、超音波を見ながらまず本品を捻転させ、筋腫を子宮壁から離脱させるようにすること。[筋腫を強引に牽引すると、子宮穿孔を引き起こす恐れがあります。]
- 筋腫茎部が太く、本品を捻転できない場合は、レゼクトスコープを用いて茎部を細くすること。[本品で掴んだ筋腫を、180° 捻転できるようにしてください。]

3. その他の注意

- 本品を購入後、はじめて滅菌する場合は、油引き等の防錆処理がなされているため、予め洗浄処理を行なうこと。
- 本品を使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 過度の力を加えたり、無理な使用はしないこと。[器具の損傷の原因になります。]

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- 感染防止の為、使用後はできるだけ早く、血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄してください。
- 洗剤の使用に際しては、洗剤の添付文書を参照してください。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置、ウォッシャーディスイネクター等)で洗浄するときには、器具同士が接触して先端部を損傷することがないように注意してください。また、関節部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納してください。
- 洗剤の残留がないように充分すすぎをしてください。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨します。
- 強アルカリ/強酸性洗剤は、器具を腐食させるおそれがありますので、使用しないでください。誤ってこれらが付着したときには、直ちに水洗いをしてください。また、金属たわしやクレンザー(磨き粉)等は器具の表面を傷つけますので、使用しないでください。

2. 消毒・滅菌

- 本品を滅菌する場合は、日本薬局方 参考情報 11. 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2-1 加熱法に示される条件を準用してください。また、滅菌器に関する詳細は滅菌器の取扱説明書に従ってください。

滅菌条件

温度	時間
115～118℃	30 分以上
121～124℃	15 分以上
126～129℃	10 分以上

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

- 滅菌後、次の使用時までには、汚染のおそれのない方法で保管してください。

【参考文献】

- 医療現場における滅菌保証のガイドライン 2005
発行：日本医科器械学会
- 器械の正しいメンテナンス法 第8版 2004
日本語版翻訳・監修 日本医科器械学会 メンテナンスマニュアル
出版委員会

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称および住所等】

■製造販売業者

アトムメディカル株式会社

〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場 2-2-1

TEL:048-853-3661(大代表) FAX:048-853-0304(代表)

■製造業者

アトムメディカル株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-18-15

TEL:03-3815-2311(大代表) FAX:03-3812-3144(代表)